


ALVEOLEX

Curativo Alveolar com Própolis

biodinâmica

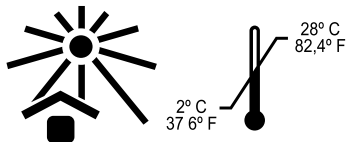

Conservar ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 2 a 28 °C.



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3
86206-006 - Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 (43) 3178-7000 | Fax + 55 (43) 3178-7099
www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+ 55 43 3178-7000

APRESENTAÇÃO:

1x10g frasco **ALVEOLEX**
ou
2x3g seringas **ALVEOLEX**
3 bicos aplicadores.
Reg. ANVISA: 10298550052.

COMPOSIÇÃO:

Própolis, Iodoformio, Cera de Abelha, Espessante e Veículo.

INDICAÇÃO:

1. Eficaz como medida de prevenção de alveolites;
2. Para estimular a cicatrização após as extrações dentais;
3. Para diminuir a dor pós-operatória;
4. No tratamento da alveolite já instalada;
5. Auxiliar na cicatrização após extrações dentais em pacientes diabéticos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

ALVEOLEX é principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. A aplicação é bastante prática e a consistência na forma de pasta proporciona a permanência prolongada de **ALVEOLEX** com as paredes alveolares. O produto após aplicado não requer atenção especial do profissional, que deve ficar direcionada ao acompanhamento e a observação do processo de cicatrização. **ALVEOLEX** é eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado. O própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. O Iodoformio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico.

Sua fórmula isenta de Eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar.

INSTRUÇÕES DE USO:

- I - Na prevenção e no auxílio à cicatrização:
 1. Após feita a extração dentária, preencher o alvéolo com **ALVEOLEX** e proceder a sutura.
- II - Nas alveolites já instaladas:
 1. Fazer a anestesia por bloqueio regional;
 2. Fazer curetagem alveolar retirando-se todo o tecido necrosado;
 3. Fazer lavagem do local com soro fisiológico;
 4. Provocar sangramento e esperar que o alvéolo se encha de sangue;
 5. Preencher o alvéolo com **ALVEOLEX** e proceder a sutura.

CUIDADOS ESPECIAIS:

- Evitar a presença de corpos estranhos no alvéolo ao aplicar o produto, bem como evitar a presença de tecidos necrosados.
- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

ALVEOLEX é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

" MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS "

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

ALVEOLEX

Curativo Alveolar con Própoleos

biodinámica

PRESENTACIÓN:

1x10g frasco ALVEOLEX
o
2x3g jeringas ALVEOLEX
3 puntas aplicadoras.

Reg. ANVISA: 10298550052.

COMPOSICIÓN:

Propóleo, Yodoformo, Cera de Abejas, Espesante y Vehículo.

INDICACIÓN:

1. Eficaz como medida de prevención de la alveolitis;
2. Para estimular la cicatrización después de extracciones dentales;
3. Para reducir el dolor postoperatorio;
4. En el tratamiento de la alveolitis existente;
5. Auxiliar en la cicatrización, después de extracciones dentales en pacientes diabéticos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

ALVEOLEX es principalmente indicado como una barrera física después de las extracciones dentarias, confiriendo protección ya que actúa como un taponamiento alveolar moldeable, constituyendo una estructura sólida para la regeneración fibrosa, evitando la contaminación de las paredes óseas. La aplicación es bastante práctica y su consistencia en forma de pasta proporciona la permanencia y el contacto demorado de ALVEOLEX con las paredes alveolares. El producto después de aplicado no requiere una atención especial del odontólogo, que debe preocuparse con el acompañamiento y la observación del proceso de cicatrización.

ALVEOLEX es eliminado gradualmente de la cavidad alveolar hasta 30 días, a la medida que ocurre el relleno del alveolo dentario con el tejido de granulación y el tejido óseo que es nuevamente formado.

El propóleo presente en la formulación, además de auxiliar en la regeneración y en la estimulación de la cicatrización, favorece también la analgesia proporcionando un posoperatorio más tranquilo al paciente. El Yodoformo fue incorporado al producto para auxiliar y complementar la acción de relleno a través de la estimulación de la proliferación celular, además presenta un ligero poder antiséptico.

Su fórmula sin Eugenol no provoca irritaciones al contacto con el tejido alveolar.

INSTRUCCIONES DE USO:

I - En la prevención y en el auxilio a la cicatrización:

1. Después de la extracción dental rellenar el alveolo con ALVEOLEX y hacer la sutura.

II - En las alveolitis existentes:

1. Hacer anestesia por bloqueo regional;
2. Hacer la curetaje alveolar retirándose todo el tejido necrosado;
3. Lavar el local con solución fisiológica;
4. Provocar el sangrado y esperar a que el alvéolo se llene de sangre.;
5. Rellenar el alvéolo con ALVEOLEX y hacer la sutura.

CUIDADOS ESPECIALES:

- Evitar la presencia de cuerpos extraños en el alveolo al aplicar el producto, así como evitar la presencia de tejidos necrosados.

- Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurándose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

ALVEOLEX es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún componente del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

USO EXCLUSIVO DEL DENTISTA

ALVEOLEX

Alveolar Dressing based on Propolis

biodinámica

CONTENTS:

1x10g flask ALVEOLEX

or

2x3g syringes ALVEOLEX

3 application tips.

Reg. ANVISA: 10298550052.

COMPOSITION:

Propolis, Iodoform, Beeswax, Thickener and Vehicle.

INDICATION:

1. Effective for alveolitis prevention;
2. To stimulate the healing after dental extractions;
3. To reduce postoperative pain;
4. In alveolitis treatment;
5. To assist in the healing after teeth extractions on diabetic patients.

TECHNICAL INFORMATION:

ALVEOLEX is specially indicated as a physical barrier after teeth extraction offering protection, once it acts as a moldable alveolar drain plug, forming a solid framework for the tissue regeneration, avoiding contamination of the bone walls. The application is very simple and its paste consistency allows ALVEOLEX to remain in contact with alveolar walls for more time. After placement it requires no special attention from the dentist other than observation of the healing process.

In a period of 30 days, ALVEOLEX will be gradually eliminated from alveolar cavity, as the normal healing of the wound takes place. The presence of Propolis in its formulation helps in the regeneration and healing stimulation as well as act in the analgesia that guarantees a calmer postoperative period to the patient. Iodoform was incorporated to the product to assist and complement the action of the filling by the enhancing of the growth of cells, besides having a light antiseptic power. The Eugenol free formulation causes non-irritation in contact with alveolar tissue.

USE INSTRUCTIONS:

I - In the prevention of alveolitis and to stimulate the healing:

1. After tooth extraction, fulfill the socket with ALVEOLEX and suture.

II - In the already installed alveolitis:

1. Anesthetize by regional blockade;
2. Do the alveolar curettage removing all necrosed tissues;
3. Irrigate with physiologic solution;
4. Provoke bleeding and wait until the socket is full of blood;
5. Fill the alveolus with ALVEOLEX, and proceed the suture.

SPECIAL CARES:

- Avoid the presence of foreign bodies and necrosed tissues in socket before applying the product.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

ALVEOLEX should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.

WARNINGS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

USO EXCLUSIVO DEL DENTISTA