

varnish film elimination.

NOTE: The product is highly adhesive, therefore no etching is required.

Recommended period of permanence in the mouth: it is until 12 hours.

It is recommended to do 2 or 3 applications at every 3 or 4 days. After applying, do not brush the teeth, allowing the product acting as longer as possible.

PRECAUTIONS FOR A SAFE USE:

- This product is topic - it does not have to be ingested.

- On the BIOPHAT application day, do not do any other form of preventive treatment using fluorides (a.e. topic application of fluoride gel or fluoride solution).

SPECIAL CARES:

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

BIOPHAT should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.


WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacture is not responsible for any damage resulting from a misuse or not provided for the instructions of use.

"KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN".

FOR USE IN DENTISTRY ONLY

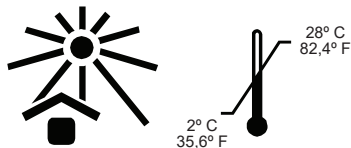

Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28°C



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira

R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3

86206-006 - Ibiaporã - Paraná - Brasil

Fone +55 43 3178-7000 | Fax + 55 43 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo

CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+55 43 3178-7000

BIOPHAT

Verniz Fluoretado

biodinâmica®

APRESENTAÇÃO:

2x3g seringas BIOPHAT.

ANVISA nº 10298550054.

COMPOSIÇÃO:

Fluoreto de Sódio, Glicerina, Veículo, Flavorizante, Edulcorante e Espessante.

INDICAÇÃO:

Na prevenção e profilaxia da cárie, onde existem pontos de desmineralização no dente.

No tratamento de colos dentinários hipersensíveis, principalmente após procedimentos de raspagem.

Para evitar a cárie marginal secundária, aplicando o produto nos bordos dos preparos após as restaurações, incrustações, coroas e pontes. Para prevenir cáries em pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos, aplicando o produto nos bordos dos brackets como prevenção. Após uso de aparelhos ortodônticos, em regiões de descalcificações. Após o clareamento dental para remineralizar o dente.

Em pacientes especiais, que não apresentam condições de higienização adequada.

OBSERVAÇÃO: Não interfere no resultado final do clareamento dental.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

BIOPHAT é um produto que contém fluoreto de sódio indicado para ser aplicado em pontos de desmineralização dos dentes. O veículo utilizado é à base de resinas naturais, apresentando como vantagens a facilidade de utilização e a característica de ser altamente adesivo à superfície do esmalte, permitindo um maior tempo de permanência na boca.

Nas regiões de dentina hiperestésica, BIOPHAT irá atuar, obliterando a luz dos canalículos dentinários, não permitindo a passagem de estímulos externos que provocam a sensação dolorosa.

Concentração de flúor presente no produto:

Fluoreto de Sódio 6 % = 2,71% íons flúor.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Limpar bem a superfície do dente onde a descalcificação está presente, ou nos locais onde se quer prevenir o aparecimento das áreas de descalcificação;
2. Remover o excesso de umidade dos dentes antes da aplicação;
3. Recomenda-se iniciar a aplicação pela arcada inferior, para que a saliva não umedeça os dentes;
4. Aplicar BIOPHAT diretamente nos locais indicados, utilizando o pincel aplicador;
5. Instruir o paciente para não comer alimentos sólidos durante as primeiras quatro horas;
6. No dia da aplicação, recomenda-se não escovar os dentes para não eliminar a película do verniz prematuramente.

OBSERVAÇÃO: Não necessita de condicionamento ácido: o produto adere o suficiente.

O tempo ideal de permanência na boca: é de até 12 horas.

Recomenda-se fazer 2 a 3 aplicações com intervalos de 3 a 4 dias.

No dia da aplicação, não escovar os dentes, para deixar o produto agir o maior tempo possível.

PRECAUÇÕES PARA USO COM SEGURANÇA:

- Este produto é tóxico - Não deve ser ingerido.

- No dia da aplicação de BIOPHAT, não realizar qualquer outra forma de tratamento preventivo utilizando fluoretos (p.ex. aplicação tópica de flúor gel ou flúor solução).

CUIDADOS ESPECIAIS:

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

BIOPHAT é contra indicado para pessoas com relatada sensibilidade a alguns dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.
O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.
" MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS "
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

BIOPHAT

Barniz con Flúor

biodinâmica®

PRESENTACIÓN:

2x3g jeringas BIOPHAT.
ANVISA n° 10298550054.

COMPOSICIÓN:

Fluoruro de Sodio, Glicerina, Vehículo, Saborizante, edulcorante y Espesante.

INDICACIÓN:

En la prevención y profilaxis de la carie, donde hay puntos de desmineralización en el diente.

En lo tratamiento de cuellos dentinarios hipersensibles, principalmente después de procedimientos de curetaje. Para evitar la carie marginal secundaria, aplicando el producto en las márgenes de los preparados después de las restauraciones, incrustaciones, coronas y puentes. Para prevenir caries en pacientes que usan aparatos ortodóncos, aplicando el producto en las márgenes de los brackets como prevención. Después del uso de aparatos ortodóncos, em regiones de descalcificación. Después del blanqueamiento dental para remineralizar el diente.

En pacientes especiales, que no presentan condiciones de higienización adecuada.

NOTA: No interfiere en lo resultado final del blanqueamiento dental.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

BIOPHAT es un producto que contiene fluoruro de sodio indicado para ser aplicado en puntos de desmineralización de los dientes. El vehículo usado en base de resinas naturales, presentando como ventajas la facilidad de uso y la característica de ser altamente adhesivo a la superficie del esmalte, permitiendo más tiempo de permanencia en la boca.

En las regiones de dentina hiperestésica, BIOPHAT actuará bloqueando la luz de los canalículos dentinarios, no permitiendo el pasaje de estímulos externos que provocan la sensación de dolor.

Concentración de flúor presente en el producto:

Fluoruro de Sodio 6 % = 2,71% iones flúor.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpiar bien la superficie del diente donde la descalcificación está presente o en los locales donde se desea prevenir la aparición de áreas de descalcificación;
2. Remover el exceso de humedad de los dientes antes de la aplicación;
3. Recomendase iniciar la aplicación por la arcada inferior, para que la saliva no proporcione humedad en los dientes;
4. Aplicar **BIOPHAT** directamente en los locales indicados, usando el cepillo aplicador;
5. Orientar al paciente para no comer alimentos sólidos durante las primeras cuatro horas;
6. En la fecha de la aplicación recomendase no cepillar los dientes para no eliminar la película del barniz prematuramente.

NOTA: No necesita de acondicionamiento ácido: el producto adhiere el suficiente.

Tiempo ideal de permanencia en la boca: hasta 12 horas.

Recomendase hacer 2 o 3 aplicaciones con intervalos de 3 o 4 días.

En la fecha de la aplicación recomendase no cepillar los dientes para permitir mas acción del producto.

PRECAUCIONES PARA EL USO CON SEGURIDAD:

- Este producto es tóxico - No debe ser ingerido.

- En el día de aplicación de **BIOPHAT**, no realizar cualquier otra forma de tratamiento preventivo utilizando fluoruros (p. ej. aplicación tópica de flúor gel o flúor solución).

CUIDADOS ESPECIALES:

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

BIOPHAT es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a alguno de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
"MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

BIOPHAT

Fluoride Varnish

biodinâmica®

CONTENTS:

2x3g syringes BIOPHAT.
ANVISA n° 10298550054.

COMPOSITION:

Sodium Fluoride, Glycerin, Vehicle, Flavoring, Sweetener and Thickener .

INDICATION:

For prevention and prophylaxis of decay where there are demineralization areas of the teeth.

On the treatment of hypersensitive dentinary colon, mainly after scaling procedures.

To avoid secondary marginal decay (apply product in the edges of the prepare after restorations, incrustations, crowns and bridges). To prevent decays in patients wearing orthodontics appliance, applying product in the edges of the brackets. After removing brackets, apply product in demineralized areas. After bleaching apply the product to remineralize the teeth.

In special patients who has no conditions to do a proper cleansing.

NOTE: It does not interfere in bleaching final result.

TECHNICAL INFORMATION:

BIOPHAT contains Sodium Fluoride it is indicated to be applied in demineralized areas of the teeth.

The vehicle used is based on natural resins which guarantees easy manipulation and the characteristic to be highly adhesive to enamel surface, granting higher period of time in the mouth.

In hypersthesic dentin areas **BIOPHAT** will act as filling the dentinal canals not allowing external stimulation (which provoke pain), to get through.

Fluoride concentration present in the product:

6% Sodium fluoride = 2,71% fluoride ions

USE INSTRUCTIONS:

1. Clean tooth surface where there is demineralization or areas where prevention is desirable;
2. Remove excess of teeth humidity before application;
3. It is recommended to begin application by inferior arch to avoid that saliva gets the teeth humid;
4. Apply **BIOPHAT** straight to the places indicated using a brush;
5. Instruct the patient not to eat solid food during the next 4 hours after application;
6. In the same day after applying the product it is recommended not to brush the teeth in order to avoid