

- 2. Apply **BIOPLIC** in one block only into the cavity;
- 3. Use an appropriate plugger to mold the desirable shape;
- 4. Light cure for 40 seconds;
- 5. Check the occlusion and wear it when necessary.

REMOVAL:

- 1. Use instrumental to remove **BIOPLIC** from the ends.;
- 2. Proceed permanent treatment;
- 3. Do not reuse the removed BIOPLIC material.

II - As temporary screw sealing on the implant:

APPLICATION:

- 1. Place a layer of **BIOPLIC** on the screw;
- 2. Light cure for 40 seconds;
- 3. Check the occlusion with an articulating paper.

REMOVAL:

- 1. Remove **BIOPLIC** with an explorer;
- 2. Proceed suitable treatment;
- 3. Do not reuse the removed **BIOPLIC** material.

III - As matrix occlusal sculpture in posterior teeth restored with composites:

- 1. Isolate the occlusal surface with Glycerin. Then, apply a thick layer of **BIOPLIC** on tooth occlusal surface adjusting **BIOPLIC** to mold according to the tooth sculpture;
- 2. Light cure for 20 seconds;
- 3. Remove the obtained matrix carefully;
- 4. Proceed restoring treatment using composite following manufacturer's instructions. Fit BIOPLIC occlusal matrix before light cure the last composite layer and softly press it to mold the surface accordingly;
- 5. Remove excess material and keep the matrix still;
- 6. Light cure for 20 seconds;
- 7. Remove the matrix and then light cure the composite according to manufacturer's instructions.

SPECIAL CARES:

After using keep the syringes tightly closed to avoid exposure to the light.

It should not be used when humidity control is impossible.

Dispose of the product in accordance with local legislation, ensuring its complete mischaracterization in order to prevent its reuse and environmental damage.

CONTRAINDICATION:

BIOPLIC should not be used if the patient is known to have sensibility to any of the ingredients listed.


WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.

"KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN".

FOR USE IN DENTISTRY ONLY

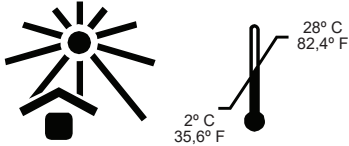

Conservar ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 2 a 28 °C.



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Valter Sodré, 4350 - SETOR 3
86206-006 - Ibioporã - Paraná - Brasil
Fone +55 (43) 3178-7000 | Fax + 55 (43) 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



BDP - Biodinamica Dental Products LDA.

Zona Ind. Ladeira da Calça,
Código Postal 3260-305
Figueiró dos Vinhos - Portugal

BIOPLIC

Restaurador Temporário Fotopolimerizável

biodinâmica

APRESENTAÇÃO:

2x2g seringas **BIOPLIC**.

ANVISA nº 10298550053.

COMPOSIÇÃO:

Grupos metacrilatos; carga orgânica; dióxido de silício; catalisadores e estabilizador.

INDICAÇÃO:

Como restaurador temporário em Endodontia, Prótese e Dentística, para vedar temporariamente as cavidades.

Em vedamento temporário de parafusos sobre implante.

Também utilizado para confecção de matriz para escultura oclusal dos dentes posteriores restaurados com resinas compostas, por sua facilidade de remoção.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

BIOPLIC é um material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizador, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurece adquirindo uma consistência borrachóide.

Quando utilizado como material restaurador provisório, veda o acesso à cavidade protegendo os canalículos dentinários expostos ou a entrada do canal radicular, impedindo a passagem de fluidos, bactérias e toxinas.

Quando utilizado para vedar temporariamente o parafuso sobre implante, sua ação consiste em formar uma barreira mecânica isolando o parafuso do implante do contato com fluidos da cavidade oral.

No uso como matriz de escultura oclusal sua ação é plástica e modeladora, devido à característica do produto.

O tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador (exposição única) é de 40 segundos (como material restaurador provisório) ou 20 segundos (na confecção de matriz oclusal).

É compatível com restaurações de resinas compostas pois não contém Eugenol.

O tempo recomendado de permanência do produto no paciente como restaurador provisório é de até 30 dias. Em casos de vedamento temporário do parafuso sobre implante, substituir a cada 30 dias.

O G.H.F. Dessensibilizador, quando presente, é indicado para reduzir e prevenir a hipersensibilidade dentinária e sensibilidade pós-operatória tornando a fase de restauração provisória mais confortável para o o paciente.

INSTRUÇÕES DE USO:

I - Como restaurador temporário:

APLICAÇÃO:

- 1. Limpar e secar bem a cavidade;
- 2. Aplicar uma quantidade suficiente (camada única) de BIOPLIC na cavidade;
- 3. Com o auxílio de um calçador apropriado, moldar com o formato desejado;
- 4. Fotopolimerizar por 40 segundos;
- 5. Verificar a oclusão e, se comprometida, desgastar a restauração onde necessário.

REMOÇÃO:

- 1. Utilizar o instrumental (p.ex. Cureta, Sonda Exploradora) para remover BIOPLIC a partir das extremidades;
- 2. Realizar o tratamento definitivo;
- 3. Não reutilizar o material restaurador provisório removido.

II - No vedamento temporário de parafusos sobre implante:

APLICAÇÃO:

- 1. Aplicar sobre o parafuso uma camada de **BIOPLIC**;
- 2. Fotopolimerizar por 40 segundos;
- 3. Checar a oclusão com papel carbono.

REMOÇÃO:

- 1. Remover o vedamento temporário com auxílio de uma sonda exploradora;
- 2. Realizar o procedimento adequado;
- 3. Não reutilizar o material restaurador provisório removido.

III - Como matriz oclusal em dentes posteriores restaurados com resina:

- 1. Antes de realizar o preparo cavitário, colocar uma fina camada de **BIOPLIC** sobre a superfície oclusal devidamente isolada (p.ex. Glicerina), ajustando o produto para formar um molde da escultura do dente a ser restaurado;
- 2. Fotopolimerizar por 20 segundos;
- 3. Remover com cuidado a matriz confeccionada com **BIOPLIC**;
- 4. Realizar o tratamento restaurador utilizando resina composta seguindo as instruções de uso fornecidas pelo fabricante, e antes de fotopolimerizar a última camada de resina, colocar a matriz confeccionada com **BIOPLIC** sobre a mesma, pressionar levemente para formar a escultura oclusal;
- 5. Remover pequenos excessos mantendo a matriz devidamente posicionada;
- 6. Fotopolimerizar por 20 segundos;
- 7. Retirar a matriz confeccionada com **BIOPLIC** e fotopolimerizar a resina seguindo instruções de uso fornecidas pelo fabricante.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Após o uso deve ser observado o perfeito vedamento das seringas para evitar que o material seja exposto à luminosidade.

Não deve ser utilizado na impossibilidade de controle da umidade.

Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

BIOPLIC é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

BIOPLIC

Restaurador Provisional Fotocurable

biodinâmica

PRESENTACIÓN:

2x2g jeringas **BIOPLIC**.

ANVISA nº 10298550053.

COMPOSICION:

Grupos metacrilato; carga orgánica; dióxido de silicio; catalizadores y estabilizadores.

INDICACION:

Como restaurador provisional en endodoncia, prótesis y odontología operatoria, para sellar temporalmente las cavidades.

En el cierre temporal de tornillo sobre implante.

También usado para hacer la matriz para escultura oclusal de los dientes posteriores restaurados con resinas compuestas, por su facilidad de remoción.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

BIOPLIC es un material resinoso, compuesto por grupos dimetacrilato, carga inorgánica, dióxido de silicio, catalizadores y estabilizador, que después de la activación por luz visible (Lámpara de Fotopolimerizar), endurece hasta una consistencia gomosa.

Cuando se utiliza como material de restauración temporal, sella el acceso a la cavidad protegiendo los túbulos dentinarios expuestos o la entrada al conducto radicular, evitando el paso de líquidos, bacterias y toxinas.

Cuando se usa para sellar temporalmente el tornillo en el implante, su acción es formar una barrera mecánica que aísla el tornillo del implante del contacto con los fluidos en la cavidad oral.

Cuando se utiliza como matriz de escultura oclusal, su acción es plástica y modeladora, debido a las características del producto.

El tiempo de exposición del producto a la luz de la Lámpara de Fotopolimerizar (exposición única) es de 40 segundos (como material restaurador temporal) o 20 segundos (al realizar una matriz oclusal).

Es compatible con las restauraciones de resina compuesta ya que no contiene eugenol.

El tiempo recomendado para que el producto permanezca en el paciente como restaurador temporal es de hasta 30 días. En casos de sellado temporal del tornillo sobre implante, reemplácelo cada 30 días.

G.H.F. El desensibilizador, cuando está presente, está indicado para reducir y prevenir la hipersensibilidad de la dentina y la sensibilidad postoperatoria, haciendo que la fase de restauración provisional sea más cómoda para el paciente.

INSTRUCCIONES DE USO:

I - Como restaurador temporal:

APLICACIÓN:

- 1. Limpiar y secar las cavidades;
- 2. Aplicar una cantidad suficiente (camada única) de **BIOPLIC** en la cavidad;
- 3. Con un accesorio apropiado, hacer el molde con el formato deseado;
- 4. Fotocurar por 40 segundos;
- 5. Verificar la oclusión y en caso de no estar conforme, desgastar la restauración donde necesario.

REMOCIÓN:

- 1. Usar instrumento apropiado (p.ej. sonda exploradora) para quitar **BIOPLIC** de los extremos;
- 2. Hacer el tratamiento definitivo;
- 3. No reutilizar el material restaurador temporal que ya fuera removido.

II - Cierre temporal de tornillo sobre implante:

APLICACIÓN:

- 1. Aplicar sobre el tornillo una camada de **BIOPLIC**;
- 2. Fotocurar por 40 segundos;
- 3. Chequear la oclusión con carbono.

REMOCIÓN:

- 1. Remover el cierre temporal con una sonda exploradora;
- 2. Hacer el procedimiento adecuado;
- 3. No reutilizar el material restaurador temporal que ya fuera removido.

III - Como matriz oclusal en dientes posteriores restaurados con resinas:

- 1. Anterior al preparo de la cavidad aplicar una camada delgada de **BIOPLIC** sobre la superficie oclusal aislada (p.ej. Glicerina) haciendo el moldeado del producto hasta tener un molde de la escultura del diente a ser restaurado;
- 2. Fotocurar por 20 segundos;
- 3. Remover con cuidado la matriz hecha con **BIOPLIC**;
- 4. Hacer el tratamiento restaurador usando resina compuesta siguiendo las instrucciones del fabricante y antes de fotocurar la ultima camada poner la matriz hecha con **BIOPLIC** sobre la misma, presionando;
- 5. Remover pequeños excesos manteniendo la matriz debidamente posicionada;
- 6. Fotocurar por 20 segundos;
- 7. Sacar la matriz confeccionada con **BIOPLIC** y fotocurar la resina siguiendo las instrucciones de uso del

fabricante.

CUIDADOS ESPECIALES:

Después del uso se debe cerrar perfectamente las jeringas, para evitar exposición a la luminosidad. No debe usarse cuando el control de la humedad es imposible.

Deseche el producto de acuerdo con la legislación local, asegurando que se queda sin caracterización para evitar su reutilización y daño ambiental.

CONTRAINDICACIÓN:

BIOPLIC es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS

No usar productos después del período indicado de validez.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

BIOPLIC

Light Cured Temporary Filling

biodinâmica

CONTENTS:

2x2g syringes **BIOPLIC**.

ANVISA nº 10298550053.

COMPOSITION:

Methacrylate groups; organic load; silicon dioxide; catalysts and stabilizer.

INDICATION:

Indicated to seal temporarily cavities in Dentistry, Prosthesis and Endodontics.

In the temporary sealing of screw on the implant.

As a matrix on occlusal sculpture in posterior teeth restored with composites.

TECHNICAL INFORMATION:

BIOPLIC is a resinous material, composed of dimethacrylate groups, inorganic filler, silicon dioxide, catalysts and stabilizer, which after activation by visible light (light-curing device), and hardens to a rubbery consistency.

When used as a temporary restorative material, it seals access to the cavity protecting the exposed dentinal tubules or the entry of the root canal, preventing the passage of fluids, bacteria and toxins.

When used to temporarily seal the screw on implant, its action is to form a mechanical barrier isolating the implant screw from contact with fluids in the oral cavity.

When used as an occlusal sculpture matrix, its action is plastic and modeling, due to the characteristic of the product.

The exposure time of the product to the light of the light-curing device (single exposure) is 40 seconds (as a temporary restorative material) or 20 seconds (when making an occlusal matrix).

It is compatible with composite resin restorations as it does not contain Eugenol.

The recommended time the product remains in the patient as a temporary restorative is up to 30 days. In cases of temporary sealing of the screw on implant, replace it every 30 days.

G.H.F. Desensitizer, when present, is indicated to reduce and prevent dentin hypersensitivity and postoperative sensitivity, making the provisional restoration phase more comfortable for the patient.

USE INSTRUCTIONS:

I - As temporary restorative:

APPLICATION:

- 1. Clean and dry the cavity;