


ÓXIDO DE ZINCO

Material Restaurador Temporário

biodinâmica®

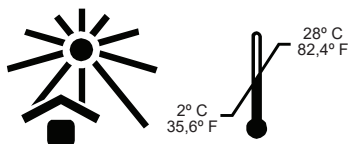


Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28°C



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3
86206-006 - Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 43 3178-7000 | Fax + 55 43 3178-7099
www.biodinamica.com.br
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713

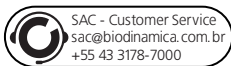

SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+55 43 3178-7000



BDP - Biodinamica Dental Products LDA.
Zona Ind. Ladeira da Calça,
Código Postal 3260-305
Figueiró dos Vinhos - Portugal
sac@bdpdental.pt | www.bdpdental.pt

APRESENTAÇÃO:

1 pote de 50g
ANVISA nº 10298550062

INDICAÇÃO:

É usado como agente de obtenção provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obtenção de canais radiculares ou como cimento cirúrgico.

COMPOSIÇÃO:

Óxido de Zinco (99 a 100,5%).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

É um pó finíssimo, branco ou ranço-amarelado, leve, inodoro, insípido, isento de partículas ásperas. O seu emprego na odontologia é geralmente associado ao Eugenol, e é utilizado basicamente como material temporário de fechamento de cavidades, bem como fechamento de câmaras pulpares nos procedimentos endodônticos. Como material provisório mantém suas características durante um período de até 3 meses após a aplicação.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Para restaurações temporárias: a mistura deve ser realizada para obtenção de uma pasta consistente que não fique aderida à placa ou à espátula;
2. Para cavidades profundas com efeito anódino: a pasta deve ser cremosa, possibilitando o contato do Eugenol com a dentina. Sobre esta pasta deve-se colocar uma nova camada mais consistente;
3. Para cimentação e obtenção de canais radiculares: a mistura deve conter uma pasta mais cremosa;
4. Para cimento cirúrgico: a pasta deve ser bem consistente, permitindo sua manipulação com os dedos.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

ZINC OXIDE

Temporary restorative material

biodinâmica®

CONTENTS:

1 pot of 50g
ANVISA nº 10298550062

INDICATION:

It is used as a temporary restorative agent, cavity lining agent, agent for temporary or permanent cementation; agent for root canal filling or as a surgical cement.

COMPOSITION:

Zinc Oxide (99 to 100,5%).

TECHNICAL INFORMATION:

It is a very thin powder, white or rancid-yellow, light, odorless, tasteless, free of rough particles. Its use in dentistry is generally associated with Eugenol, and it is used basically as a temporary material for closing cavities, as well as closing pulp chambers in endodontic procedures. As a provisional material, it maintains its characteristics for a period up to 3 months after the application.

INSTRUCCIONES FOR USE:

1. For temporary restorations: the mixture must be done to obtain a consistent paste that does not stick to the plate or the spatula;
2. For deep cavities with anodyne effect: the paste must be creamy, allowing the contact of Eugenol with the dentin. Over this paste, a new layer, more consistent, must be placed;
3. For cementation and obturation of root canals: the mixture must contain a creamier paste;
4. For surgical cement: the paste must be very consistent, allowing its manipulation with the fingers.

SPECIAL CARES:

Dispose the product according to local legislation, ensuring its complete decharacterization in order to prevent its reuse and environmental damage.

CONTRAINDICATIONS:

Contraindicated for people with reported sensitivity to the product.

WARNINGS:

Do not use products beyond the indicated validity period.

The manufacturer is not responsible for damages caused by incorrect or unforeseen use in the instructions for use.

“KEEP THE PRODUCT OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.

EXCLUSIVE USE OF THE DENTAL SURGEON

CUIDADOS ESPECIALES:

Realizar la eliminación del producto de acuerdo con la legislación local, asegurando su completa descaracterización para evitar su reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicated for people with reported sensitivity to the product.

ADVERTENCIAS:

No utilice productos más allá del período de validez indicado.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

ÓXIDO DE ZINC

Material restaurador provisional

biodinâmica®

PRESENTACIÓN:

1 pote de 50g .

ANVISA nº 10298550062

INDICACIÓN:

Se utiliza como agente de restauración provisional, agente de fondo de cavidad, agente para cimentación provisional o permanente o como cemento quirúrgico.

COMPOSICIÓN:

Óxido de zinc (99 a 100,5%)

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Es un polvo muy fino, blanco o amarillo rancio, ligero, inodoro, insípido, sin partículas ásperas. Su uso en la odontología está generalmente asociado al Eugenol, y se utiliza básicamente como material temporal de cierre de cavidades, así como cierre de cámaras pulpares en los procedimientos endodóticos. Como material provisional mantiene sus características durante un período de hasta 3 meses después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1- Para restauraciones temporales: la mezcla debe realizarse para obtener una pasta consistente que no se adhiera a la placa o a la espátula.;
- 2- Para cavidades profundas con efecto anodino: la pasta debe ser cremosa, permitiendo el contacto del Eugenol con la dentina. Sobre esta pasta se debe colocar una nueva capa más consistente;
- 3- Para cementación y obturación de conductos radiculares: la mezcla debe contener una pasta más cremosa;
- 4- Para cemento quirúrgico: la pasta debe ser muy consistente, permitiendo su manipulación con los dedos.