

b) Perform instrumentation, irrigating with physiological saline when saturation occurs;

c) Repeat this procedure as necessary;

d) After instrumentation is complete, irrigate with physiological saline.

II. IN CAVITY ASEPSIS PREPARATION:

a) Clean the cavity with a small amount of CLOREXORAL GEL 2% using a cotton ball;

b) Remove excess CLOREXORAL GEL 2% and dry the cavity with airflow. The use of water in the cavity is optional. Residues of CLOREXORAL GEL 2% do not interfere with material adhesion. uct;

SPECIAL CARES:

Do not ingest.

Do not use as an oral rinse.

Avoid unnecessary contact with the tongue and other parts of the mouth.

CLOREXORAL GEL 2% has an extremely bitter taste and may temporarily alter taste and cause a warming sensation when in contact with the tongue.

Dispose of the product in accordance with local regulations, ensuring complete destruction to prevent reuse and environmental damage.

CONTRAINDICATION:

CLOREXORAL GEL 2% should not be used in patients known to be sensitive to any of the listed ingredients.


WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.

"KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN".

FOR USE IN DENTISTRY ONLY

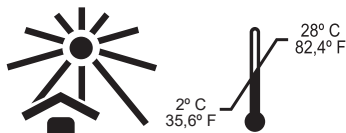

Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28 °C.



Biodinâmica Quím. e Farm. Ltda.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Ind. Brasileira

R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3

86206-006 Ibiporã - Paraná - Brasil

Fone +55 43 3178-7000 Fax +55 43 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo

CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+ 55 43 3178-7000

CLOREXORAL GEL 2%

Material para Desinfecção de Canal Radicular

biodinâmica®

APRESENTAÇÃO:

2x3g seringas CLOREXORAL GEL 2%

3 bicos aplicadores.

ANVISA nº 10298550089.

COMPOSIÇÃO:

CLOREXORAL GEL 2%: Digluconato de Clorexidina (2%), Metilparabeno, Hidroxietilcelulose e Água Deionizada.

INDICAÇÃO:

CLOREXORAL GEL 2% é utilizado para irrigação de canais radiculares, como auxiliar na instrumentação endodôntica e para assepsia de preparos cavitários.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

Os microorganismos e seus produtos metabólicos são considerados os responsáveis pelas patologias pulpares e periapicais. Desse modo, a completa sanificação do sistema de canais radiculares é essencial para o sucesso do tratamento endodôntico.

CLOREXORAL GEL 2% é um produto cujo princípio ativo é o digluconato de clorexidina. A clorexidina foi introduzida há mais de 30 anos como um desinfetante geral de largo espectro bacteriano para bactérias tanto gram-positivas como para gram-negativas. A clorexidina quando em baixas concentrações (0,12%) é um agente bacteriostático e em alta concentração (2%) se transforma em um rápido agente bactericida.

A clorexidina age por meio da interação eletrostática de suas cargas positivas e negativas na parede celular da bactéria, ocorrendo ruptura da mesma, precipitando o citoplasma e causando a morte da bactéria. É uma substância que possui substantividade e seu efeito residual é de aproximadamente 48 horas.

Possui baixa toxicidade não lesionando os tecidos periapicais.

INSTRUÇÕES DE USO:

I - COMO AUXILIAR NA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA:

a) Inserir o produto no canal, até o total preenchimento;

b) Realizar a instrumentação e quando houver saturação irrigar com soro fisiológico;

c) Repetir o procedimento tanto quanto necessário;

d) Ao terminar a instrumentação, irrigar com soro fisiológico.

II - NA ASSEPSIA DE PREPAROS CAVITÁRIOS:

a) Limpar a cavidade com pequena quantidade de CLOREXORAL GEL 2% aplicado sobre algodão;

b) Remover o excesso de CLOREXORAL GEL 2% e secar a cavidade com jato de ar. O uso de água na cavidade é opcional. Resíduos de CLOREXORAL GEL 2% não interferem na adesão do material.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Não ingerir o produto.

Não utilizar como enxaguatório bucal.

Evitar o contato desnecessário do produto com a língua ou outras regiões da boca.

CLOREXORAL GEL 2% é de sabor extremamente amargo e quando em contato com a língua pode causar alteração temporária no paladar e ardência.

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

CLOREXORAL GEL 2% é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a alguns dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.
Em caso de exposição accidental à mucosa oral, uma leve irritação local pode ocorrer. Remover e enxaguar com água.
" MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS "
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

CLOREXORAL GEL 2%

Material para Desinfecção del Conducto Radicular

biodinâmica®

PRESENTACIÓN:

2x3g jeringas CLOREXORAL Gel 2%
3 puntas aplicadoras.
ANVISA nº 10298550089.

COMPOSICIÓN:

CLOREXORAL Gel 2%: Digluconato de Clorexidina (2%), Metilparabeno, Hidroxietilcelulose y Agua Deionizada.

INDICACIÓN:

CLOREXORAL GEL 2% es utilizado para la irrigación de las cavidades radicales, como auxiliar en la instrumentación endodóncica y para la asepsia de la preparación de la cavidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Los microorganismos y sus productos metabólicos son considerados los responsables por las patologías pulpar y periapical. Por ser así, la completa limpieza del sistema de los conductos radicales es esencial para el éxito del tratamiento endodóncico.

CLOREXORAL GEL 2% es un producto cuyo el principio activo es el digluconato de clorexidina. La clorexidina fue introducida ha más de 30 años como un desinfectante general de gran espectro bacteriano para bacterias gram positivas y gram negativas. La clorexidina cuando en bajas concentraciones (0,12%) es un agente bacteriostático y en altas concentraciones (2%) transformase en un rápido agente bactericida. La clorexidina actúa a través de la interacción electrostática de sus cargas positivas y negativas en la pared celular de la bacteria, ocurriendo la ruptura, precipitando el citoplasma y causando la muerte de la bacteria. Es una sustancia que presenta substantividad y su efecto residual es de aproximadamente 48 horas. Posee baja toxicidad no lesionando los tejidos periapicais.

INSTRUCCIONES DE USO:

I. COMO AUXILIAR EN LA INSTRUMENTACIÓN ENDODÓNCICA:

- a) Insertar o introducir el producto hasta que este totalmente llenado;
- b) Realizar la instrumentación y cuando ocurrir la saturación irrigar con suero fisiológico;
- c) Repetir el procedimiento tanto cuanto necesario;
- d) Finalizado el procedimiento, irrigar con suero fisiológico.

II. EN LA ASEPSIA DE CAVIDADES:

- a) Limpiar la cavidad con una pequeña cantidad de **CLOREXORAL GEL 2%** aplicado sobre algodón;
- b) Remover el exceso de **CLOREXORAL GEL 2%** y secar la cavidad con chorro de aire. El uso del agua en la cavidad es opcional. Residuos de **CLOREXORAL GEL 2%** no interfieren en la adhesión del material.

CUIDADOS ESPECIALES:

No ingerir el producto.

No utilizar para enjuagar la boca.

Evitar el contacto del producto con la lengua o otras regiones de la boca.

CLOREXORAL GEL 2% presenta un sabor extremadamente amargo y cuando en contacto con la lengua puede causar alteración temporaria del paladar y picazón.

Descartar el producto asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICAÇÃO:

CLOREXORAL GEL 2% es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validad.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
"MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".
USO EXCLUSIVO DEL DENTISTA

CLOREXORAL GEL 2%

Canal Root Disinfection Material

biodinâmica®

CONTENTS:

2x3g syringes CLOREXORAL Gel 2%
3 application tips.
ANVISA nº 10298550089.

COMPOSITION:

CLOREXORAL Gel 2%: Chlorhexidine Digluconate (2%), Methylparaben, Hydroxyethylcellulose and Deionized Water.

INDICATION:

CLOREXORAL GEL 2% is used for root canal irrigation, aiding in endodontic instrumentation, and cavity asepsis preparation

TECHNICAL INFORMATION:

Microorganisms and their metabolic products are considered responsible for pulpal and periapical pathologies. Therefore, thorough cleaning of root canal systems is essential for successful endodontic treatment. The principal active ingredient in CLOREXORAL GEL 2% is Chlorhexidine Digluconate. Chlorhexidine was introduced over 30 years ago as a general disinfectant effective against gram-positive and gram-negative bacteria. Chlorhexidine, at low concentration (0.12%), acts as a bacteriostatic agent, while at high concentration (2%), it becomes a fast bactericidal agent.

Chlorhexidine acts through an electrostatic interaction between its positive and negative charges with the bacteria's cellular wall, disrupting it, precipitating the cytoplasm, and causing bacterial death. It exhibits substantivity, with a residual effect lasting approximately 48 hours, and has low toxicity without harming periapical tissue.

USE INSTRUCTIONS:

I. AS AN AUXILIARY IN ENDODONTIC INSTRUMENTATION:
a) Fill the canal completely with the prod