

1. Clean or prophylaxis with water and pumice powder;
2. Protection of soft tissues with vaseline or rubber dam;
3. Dry and apply the product during 2 - 3 minutes;
4. Wash.

SPECIAL CARES:

- Product is highly concentrated and caustic (pH 8,5). Protect soft tissues with vaseline or rubber dam.
- Presents secondary reaction regarding dental coloration (black stains) in the places where there are decays or structural failure, then it is not recommended to be used in permanent dentition.

- Protect yourself to avoid stains in the fingers and clothes when manipulating the product or its package.

NOTE: Repeat procedure at least once again and keep control over the patient.

SPECIAL RECOMMENDATIONS:

In case of accidental stains in skin apply on it a solution of Iodine tincture.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

CARIESTOP should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.


WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.

"KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN".

FOR USE IN DENTISTRY ONLY

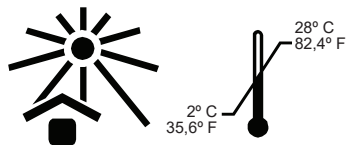

Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28 °C.



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira

R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3

86206-006 - Ibiaporã - Paraná - Brasil

Fone +55 (43) 3178-7000 | Fax + 55 (43) 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo

CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+ 55 43 3178-7000

CARIESTOP
Cariostático

biodinâmica

APRESENTAÇÃO:

1x10 mL frasco **CARIESTOP 12%**.

ou

1X5 mL frasco **CARIESTOP 30%**.

ou

1x5 mL **CARIESTOP 38%**

ANVISA nº 10298550048.

COMPOSIÇÃO:

Ácido Fluorídrico, Nitrato de Prata, Hidróxido de Amônia e Água Deionizada.

INDICAÇÃO:

Como agente inibidor da cárie dental;

Na prevenção e inibição da cárie dentária em crianças;

Em casos de cáries de mamadeira noturna;

Na prevenção de cáries secundárias, após restaurações a amálgama ou blocos fundidos;

Na prevenção de cáries em fôssulas e fissuras;

Como dessensibilizador de dentina.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

A solução de diamino fluoreto de prata a 12%, 30% e 38% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de CaF_2 (fluoreto de cálcio) e Ag_3PO_4 (fosfato de prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental.

A ação anti-microbiana se dá principalmente por sua ação sobre *S. mutans*.

Estudos relataram uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos.

INSTRUÇÕES DE USO:

I - Tratamento de Choque:

4 aplicações: 1 por semana, com duração de 1 a 4 minutos dependendo da idade.

II - Tratamento de Manutenção:

1 aplicação a cada 6 ou 12 meses.

Técnicas ou procedimentos:

1. Limpar ou fazer profilaxia com água e pedra pomes;

2. Proteger os tecidos moles com vaselina ou isolamento absoluto;

3. Secar e aplicar o produto por cerca de 2 a 3 minutos;

4. Lavar.

OBSERVAÇÃO: Repetir a aplicação pelo menos mais uma vez e manter o paciente sob controle.

CUIDADOS ESPECIAIS:

- O produto é altamente concentrado e alcalino, sendo o pH em torno de 8,5 a 9,0. Isolar os tecidos moles com vaselina ou então usar isolamento absoluto (dique de borracha);

- Possui efeito secundário quanto à coloração dental (manchas negras) nos locais que apresentam cáries ou defeito na estrutura, por isso não deve ser usado em dentes permanentes;

- Proteger-se para não manchar os dedos e a indumentária, tanto na hora da aplicação quanto ao manusear a embalagem para a aplicação.

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

NOTA: Repita a aplicação, pelo menos, mais uma vez e manter o controle sobre o paciente

RECOMENDACOES ESPECIAIS:

No caso de mancha de pele causada pelo contato indevido com o **CARIESTOP**, passar no local tintura de lodo. Descarte: evitar descarte em esgotos e seguir a legislaao vigente.

CONTRAINDICAAO:

CARIESTOP   contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTENCIAS:

N o utilizar produtos al m do per odo indicado de validade.

O fabricante n o se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou n o previsto nas instruoes de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGI O DENTISTA

CARIESTOP
Cariost tico

biodin mica

PRESENTA O:

1x10 mL frasco **CARIESTOP 12%**.

o

1X5 mL frasco **CARIESTOP 30%**.

o

1X5 mL frasco **CARIESTOP 38%**.

ANVISA n o 10298550048.

COMPOSIC O:

 cido Fluoridrico, Nitrato de Plata, Hidr xido de Amonia e Agua Deionizada.

INDICA O:

Como agente inibidor de la carie dental;

En la prevenci n e inhibici n de la carie dental en los ni os;

En casos de caries por biber n;

En la prevenci n de caries secundarias, despu s de restauraciones de amalgama o bloques fundidos;

En la prevenci n de caries en fosas y fisuras;

Como desensibilizador de la dentina.

INFORMAC O T CNICA:

La soluci n de diamino fluoruro de plata al 12%, 30% y 38% en medio amoniacal, promueve el fortalecimiento de la estructura del esmalte por la formaci n de CaF2 (fluoruro de calcio) y Ag3PO4 (fosfato de plata) a trav s de suya reacci n con la estructura dentaria y tambi n de la formaci n de complejos proteicos de plata en la superficie del diente. La acci n preventiva est  relacionada con el ion fluoruro y la controladora con el ion plata. La acci n cariost tica presentase pela estimulaci n de la esclerosis de la dentina, no permitiendo el avance de la carie dental. La acci n anti microbiana presentase principalmente por su acci n sobre S. Mutans.

Estudios relataran una reducci n de 65% del  ndice de carie en molares, con la aplicaci n a cada tres meses de los cariost ticos.

INSTRUCCIONES DE USO:

I - Tratamiento de Choque:

4 aplicaciones: 1 por semana, con duraci n de 1 a 4 minutos, de acuerdo con la edad.

II - Tratamiento de Mantenimiento:

1 aplicaci n cada 6 o 12 meses.

T cnicas o procedimientos:

1 - Limpiar o profilaxis con agua y piedra p mez;

2 - Proteger los tejidos moles con vaselina o aislamiento absoluto (rubber dam);

3 - Secar y aplicar el producto durante 2 - 3 minutos;

4 - Lavar.

CUIDADOS ESPECIAIS:

- El producto es altamente concentrado y c ustico, presentando pH en torno de 8,5. Recomendase aislar los tejidos moles con vaselina o usar aislamiento absoluto (rubber dam);

- Tiene acci n secundaria con respecto a coloraci n dental (puntos negros) en los locales que presentan caries o problemas en la estructura, as  no debe ser usado en dientes permanentes;

- Protegerse para no manchar los dedos y la ropa o uniforme, tanto a la hora de la aplicaci n cuanto al manoseo del embalaje para aplicaci n.

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislaci n local, asegurandose eliminar completamente sus caracter sticas con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilizaci n y da os ambientales.

NOTA: Repetir la aplicaci n al menos una ves m s y mantener control sobre el paciente.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

En caso de mancha en la piel causada por contacto indevido con **CARIESTOP**, pasar en el local Soluci n de Tintura de lodo.

- Descarte: evitar el despejo en alcantarillas y seguir las leyes vigentes.

CONTRAINDICA O:

CARIESTOP es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a alguno de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos despu s del per odo indicado de validez.

El fabricante no se hace responsable por da os causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NI OS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

CARIESTOP
Cariostatic

biodin mica

CONTENTS:

1x10 mL flask **CARIESTOP 12%**.

or

1X5 mL flask **CARIESTOP 30%**.

or

1X5 mL flask **CARIESTOP 38%**.

ANVISA n o 10298550048.

COMPOSITION:

Fluoridric Acid, Silver Nitrate, Amonia Hydroxide and Deionized Water.

INDICATION:

Inhibiting agent from dental decay;

Prevention and inhibiting of dental decay in children;

For night feeding cases (when kids eat at night and do not brush their teeth appropriately);

Preventing secondary decays after amalgam restorations or melt down blocks;

Prevention of decays in pits and fissures;

As dentin desensitizer.

TECHNICAL INFORMATION:

Silver Fluoride solution 12%, 30% and 38% in amoniacal environment performance the strength of the enamel structure by forming CaF2 (calcium fluoride) and Ag3PO4 (silver phosphate), through its reaction with dental structure. Besides, there is the formation of proteical complexes of silver on the tooth surface. Preventing action is related to Fluoride ion and controlling action with Silver ion. Cariostatic action is obtained by the stimulation of dentin sclerosis, not allowing the progress of dental decay. Antimicrobial action is given mainly because its action over S. Mutans.

Researches and studies reported a reduction of 65% of decays in molars when cariostatics are applied every three months.

USE INSTRUCTIONS:

I - Intensive treatment:

4 applications: 1 per week during from 1 to 4 minutes according to the age.

II - Maintenance treatment:

1 application every 6 or 12 months.

Techniques or procedures