


EUCALIPTOL

Solvente de Gutta-Percha

biodinâmica

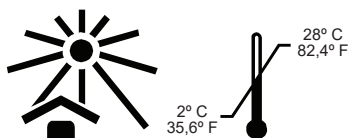

Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28°C



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3
86206-006 - Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 43 3178-7000 | Fax + 55 43 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+55 43 3178-7000



BDP - Biodinâmica Dental Products LDA.

Zona Ind. Ladeira da Calça,
Código Postal 3260-305
Figueiró dos Vinhos - Portugal

APRESENTAÇÃO:

1x10 mL frasco **EUCALIPTOL**.

ANVISA nº 10298550085

COMPOSIÇÃO:

Eucaliptol U.S.P.

INDICAÇÃO:

EUCALIPTOL é utilizado como solvente dos cones de gutta-percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

EUCALIPTOL é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante.

Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Colocar uma gota do produto na entrada do conduto radicular e esperar 5 minutos para que o **EUCALIPTOL** amoleça o cone de gutta-percha;
2. Com o auxílio de uma lima endodôntica vá instrumentando e retirando o cone de gutta-percha;
3. Colocar novamente **EUCALIPTOL**, quando perceber que o cone de gutta-percha remanescente estiver seco ou quebradiço;
4. Repetir a operação até que seja necessário.

OBSERVAÇÃO:

Para melhores resultados utilizar o **EUCALIPTOL** puro. A mistura com outros produtos pode tornar a operação muito lenta.

CUIDADOS ESPECIAIS:

- Manter os frascos bem fechados para evitar volatilização do produto.
- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

EUCALIPTOL é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

EUCALIPTOL

Solvente de Gutta Percha

biodinâmica®

PRESENTACIÓN:

1x10mL frasco **EUCALIPTOL**.
ANVISA nº 10298550085

COMPOSICIÓN:

Eucaliptol U.S.P.

INDICACIÓN:

EUCALIPTOL es usado como solvente de gutta-percha, auxiliando en la remoción de la obturación de los conductos radiculares.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

EUCALIPTOL es obtenido del aceite de variadas especies de Eucalyptus, ricas en 1,8 – Cineol. Es un líquido límpido de color amarillo pálido, de olor alconforado, característico de sabor picante. Prácticamente insoluble en agua, pero soluble con alcohol, cloroformo, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, aceites vegetales y esencias.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Poner una gota del producto en la entrada del conducto radicular y aguarde durante 5 minutos para que el **EUCALIPTOL** tenga acción de amolecer a la gutta percha;
2. Con el auxilio de una lima endodóncia haga el procedimiento para retirar la gutta-percha;
3. Poner más **EUCALIPTOL**, cuando percibir que la gutta percha se quedo seca o rota;
4. Repita la operación hasta que sea necesario.

NOTA:

Para mejores resultados usar **EUCALIPTOL** puro. La mezcla con otros productos puede hacer la operación lenta.

CUIDADOS ESPECIALES:

Mantener el frasco bien cerrado para evitar la volatilización del producto.

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

EUCALIPTOL es contraindicado para personas con reportada sensibilidad al producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

EUCALIPTOL

Gutta Percha Solvent

biodinâmica®

CONTENTS:

1x10 mL flask **EUCALYPTOL**.
ANVISA nº 10298550085

COMPOSITION:

Eucalyptol U.S.P.

INDICATION:

As gutta-percha point solvent, assisting in the root canal restoration removal.

TECHNICAL INFORMATION:

EUCALIPTOL is obtained from essential oil of Eucalyptus taken from several Eucalyptus breeds that present big quantity of 1,8 - Cineol. It is a clean liquid, colorless or pale yellow color, camphor like odor, cooling taste and spicy. Almost insoluble in water, but soluble with alcohol, Chloroform, Carbon Sulfate, Glacial Acetic acid, vegetal oils and essences.

USE INSTRUCTIONS:

1. Place 1 drop of **EUCALIPTOL** in the entrance of radicular conduct and wait for 5 minutes until the product start solving gutta-percha point;
2. Remove gutta-percha point using an endodontic file;
3. In case gutta-percha point remains dry and brittle place **EUCALIPTOL** again;
4. Repeat procedure until it is necessary.

NOTE:

For better results use pure **EUCALIPTOL**. The mixture with other products will make the procedure very slow.

SPECIAL CARES:

Keep the flask well closed, in order to avoid the volatilization of the product.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

EUCALIPTOL should not be used in patients is known to have sensibility to the product.

WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.
“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.

FOR USE IN DENTISTRY ONLY