


# EVIPLAC PASTILHAS

## Pastilhas Evidenciadoras de Placa Bacteriana

biodinâmica

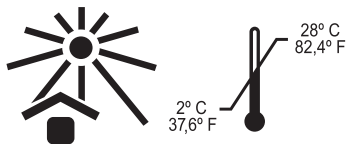

Conservar ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 2 a 28 °C.



**BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.**  
CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira  
R. Ronat Walter Sodré, 4350 - Parque Industrial IV  
86200-000 - Ibitiporã - Paraná - Brasil  
Fone +55 (43) 3178-7000 | Fax + 55 (43) 3178-7099  
[www.biodinamica.com.br](http://www.biodinamica.com.br)  
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo  
CRO/PR 9713



SAC - Customer Service  
[sac@biodinamica.com.br](mailto:sac@biodinamica.com.br)  
+ 55 43 3178-7000

### APRESENTAÇÃO:

**EVIPLAC PASTILHAS** (frasco com 60 unidades).

ou

**EVIPLAC PASTILHAS** (frasco com 120 unidades).

ou

**EVIPLAC PASTILHAS BLISTER** (10 envelopes contendo 6 pastilhas cada = 60 unidades ou 20 envelopes contendo 6 pastilhas cada = 120 unidades).

ANVISA nº 10298550090.

### COMPOSIÇÃO:

Fucsina Básica (2%), Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes.

### INDICAÇÃO:

**EVIPLAC PASTILHAS** é indicado para corar a placa bacteriana, tornando-a visível.

### INFORMAÇÃO TÉCNICA:

A fórmula de **EVIPLAC** à base de fucsina básica, confere ao produto um maior poder de corar a placa bacteriana, nos dentes aparentemente limpos, de uma cor que contraste com os dentes. Este artifício não só facilita a localização da placa, como também favorece a instrução de higienização.

### INSTRUÇÕES DE USO:

1. Colocar uma pastilha na boca e ir esfregando nos dentes, com o auxílio da língua, até a completa dissolução;
2. Depois fazer um bochecho com água para retirar os excessos.

### OBSERVAÇÃO:

Todas as áreas que ficarem coradas de vermelho acusam a presença da placa bacteriana que deve ser completamente retirada pela escova, fio ou fita dental.

Pode ser usada diariamente, e preferencialmente na última escovação diária.

### CUIDADOS ESPECIAIS:

O objetivo único do produto é corar placa bacteriana de uma cor contrastante com os dentes e tecidos;

Deve ser empregado apenas como um auxiliar na visualização da placa bacteriana;

A placa visualizada deve ser totalmente eliminada pela escovação;

Proteger as roupas do contato com o produto, pois geralmente as manchas provocadas por ele são de difícil remoção.

Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

### CONTRAINDICAÇÃO:

**EVIPLAC PASTILHAS** é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

### ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

\* MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS \*

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

# EVIPLAC PASTILLAS

Pastillas Colorante Detectora de la Placa Bacteriana

bioDinámica

## PRESENTACIÓN:

**EVIPLAC PASTILLAS** (frasco con 60 unidades).

o

**EVIPLAC PASTILLAS** (frasco con 120 unidades).

o

**EVIPLAC PASTILLAS Blister** (10 ampollas conteniendo 6 pastillas cada = 60 unidades o 20 ampollas conteniendo 6 pastillas cada = 120 unidades).

ANVISA nº 10298550090.

## COMPOSICIÓN:

Fucsina básica (2%), Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato del Sodio y Excipientes.

## INDICACIÓN:

**EVIPLAC PASTILLAS** es indicado para colorear la placa bacteriana, haciendo con que sea visible.

## INFORMACIÓN TÉCNICA:

La formulación del **EVIPLAC** en base de fucsina básica, garantiza al producto un poder más grande para colorar la placa bacteriana, en los dientes aparentemente limpios, de un color contrastante a de los dientes. Este artificio facilita la localización de la placa y también ayuda en la instrucción de higienización.

## INSTRUCCIONES DE USO:

1. Poner una pastilla en la boca y con la lengua pasar la pastilla en los dientes hasta disolver de todo;
2. Después, lavar con agua para sacar los excesos.

## NOTA:

Todas las áreas que quedaren coloreadas de rojo acusan la presencia de la placa bacteriana que debe ser removida totalmente por el cepillado de los dientes o hilo dental.

Puede ser usada diariamente y de preferencia en la última higienización del día.

## CUIDADOS ESPECIALES:

El único intento del producto es colorear la placa bacteriana de un color contrastante con los dientes y tejidos;

Debe ser usado solamente como auxiliar en la visualización de la placa bacteriana;

La placa visualizada debe ser totalmente eliminada por el cepillado de los dientes;

Proteger las ropas del paciente porque las manchas son de difícil remoción.

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

## CONTRAINDICACIÓN:

**EVIPLAC PASTILLAS** es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.

## ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

\*MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS\*.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

# TABLETS EVIPLAC

Disclosing Tablets for Bacterial Plaque

bioDinámica

## CONTENTS:

**TABLETS EVIPLAC** (flask with 60 units).

or

**TABLETS EVIPLAC** (flask with 120 units).

or

**TABLETS EVIPLAC Blister** (10 envelopes with 6 tablets each = 60 units or 20 envelopes with 6 tablets each = 120 units).

ANVISA nº 10298550090.

## COMPOSITION:

Basic Fucsin (2%), Saccharin Sodium, Lactose, Sodium Cyclamate and Excipients.

## INDICATION:

**TABLETS EVIPLAC** is indicated to disclose bacterial plaque.

## TECHNICAL INFORMATION:

The formulation of **EVIPLAC** is based on basic fucsin guarantees to the product a higher performance for disclosing the bacterial plaque, on apparently clean teeth, staining them with a color that contrast to the teeth. Such device not only disclose the plaque but helps in the cleansing instruction as well.

## USE INSTRUCTIONS:

1. Place one tablet in mouth and go rubbing to the teeth, using the tongue, until the complete dissolution;
2. After, rinse with water to remove excess.

## NOTE:

All the areas stained indicate bacterial plaque presence that must be completely removed by toothbrush and dental floss.

Can be daily used and preferably before the last tooth brushing.

## SPECIAL CARES:

The main use of the product is to color the bacterial plaque of a contrasting color with teeth and tissue;

It must be used only as an auxiliar in the disclosing of the bacterial plaque;

Disclosed plaque must be removed when brushing it;

Protect clothes away from the contact with the product once product's stain is difficult to be removed.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

## CONTRAINICATION:

**TABLETS EVIPLAC** should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.

## WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.

\*KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN\*.

FOR USE IN DENTISTRY ONLY