


HEMOSTANK

Hemostático para uso tópico

biodinâmica®

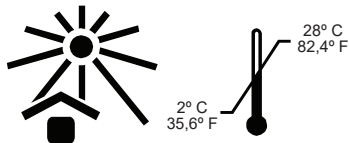


Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28°C



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3
86206-006 - Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 43 3178-7000 | Fax + 55 43 3178-7099
www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713

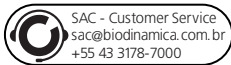

SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+55 43 3178-7000



BDP - Biodinâmica Dental Products LDA.

Zona Ind. Ladeira da Calça,
Código Postal 3260-305

Figueiró dos Vinhos - Portugal

APRESENTAÇÃO:

1x10mL frasco **HEMOSTANK**

ANVISA nº 10298550099

COMPOSIÇÃO:

Cloreto de Alumínio 25%, Água e Metilparabeno.

INDICAÇÃO:

HEMOSTANK é indicado como coadjuvante nos casos em que é desejável a precisão de moldagem das bordas gengivais dos preparos cavitários, em ação conjunta a fios afastadores gengivais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

HEMOSTANK é um hemostático de uso tópico, indicado para promover a hemostasia durante o afastamento gengival antes da realização de moldagens. Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. É considerado seguro e eficaz. Os tecidos após afastados voltam à sua condição normal. Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser utilizado por pacientes cardíacos devido à ausência de epinefrina.

INSTRUÇÕES DE USO:

Como coadjuvante em moldagens de preparos cavitários:

Umedecer o fio afastador / retrator gengival na solução de **HEMOSTANK** e utilizar conforme técnica adequada.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Usar somente a quantidade de gotas necessárias e após obter a impressão, enxaguar abundantemente o local para remover o produto.

O produto é irritante para os olhos e para mucosas.

O uso inadequado do produto pode levar a irritação ou mesmo destruição dos tecidos. Os fios afastadores gengivais impregnados com **HEMOSTANK** não devem ser forçados para além da extensão apical da fenda gengival ou envolver o tecido gengival estrangulado contra a superfície dental.

Não usar sobre fios afastadores / retratores já impregnados.

Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

HEMOSTANK é contraindicado para pessoas com sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

HEMOSTANK

Hemostático para uso tópico

biodinámica

PRESENTACIÓN:

1x10mL frasco **HEMOSTANK**

ANVISA nº 10298550099

COMPOSICIÓN:

Cloruro de Aluminio 25%, Agua y Metilparabeno.

INDICACIÓN:

HEMOSTANK es indicado como coadyuvante en los casos en que se desea precisión del moldeado de las bordas gingivales de los preparos de las cavidades, en acción conjunta a los hilos retractores.

INFORMACIONES TÉCNICAS:

HEMOSTANK es un hemostático de uso tópico, indicado para promover la hemostasia durante el espaciamiento gingival antes de la realización de los moldeados. Contiene cloruro de aluminio en su composición que actúa principalmente como un adstringente. Es considerado seguro y eficaz. Los tejidos después espaciados vuelven a la su condición normal. No interviene en la cura de los materiales del moldeado y puede ser utilizado por pacientes cardíacos debido a la ausencia de epinefrina

INSTRUCCIONES DE USO:

Como coadyuvante en moldeado de preparos de las cavidades:

Humedecer el hilo espaciador / retractor gingival en solución de **HEMOSTANK** y utilizar conforme técnica adecuada.

CUIDADOS ESPECIALES:

Use solamente la cantidad de gotas necesarias y después obtener la impresión, lavar abundantemente el local para remoción del producto.

El producto es irritante para los ojos y para mucosas.

El uso inadecuado del producto puede llevar a irritación o mismo destrucción de los tejidos. Los hilos espaciadores gingivales impregnados con **HEMOSTANK** no deben ser forzado para más allá de la extensión apical de la fenda gingival, o envolver el tejido gingival estrangulado contra la superficie dental.

No utilizar sobre hilos espaciadores / retractores ya impregnados.

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurándose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

HEMOSTANK es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

HEMOSTANK

Hemostatic for topical use

biodinámica

CONTENTS:

1x10mL flask **HEMOSTANK**

ANVISA nº 10298550099

COMPOSITION:

Aluminium Chloride 25%, Deionized Water and Methylparaben.

INDICATION:

HEMOSTANK is indicated as a helper in cases where is needed a precision in the border's gum molding, during cavities prepare and it is used together with the retraction cord.

TECHNICAL INFORMATION:

HEMOSTANK is a hemostatic for topical use, indicated to promote hemostasis during the gum removal before the realizations of moldings. Contains Aluminium Chloride in it's composition that acts mainly as astringent. It is considered safe and efficient. The tissue after moved away come back in it's normal condition. Does not interfere in the molding materials setting and can be used by cardiac patients due the absence of epinephrine.

USE INSTRUCTIONS:

As a helper in molding of cavity preparations:

Humidify the retraction cord with the **HEMOSTANK** solution and then proceed in accordance to the indicated technique.

SPECIAL CARES:

Use only the necessary quantity of drops and after getting the desired result, rinse abundantly the local to remove the product.

The product is irritating for the eyes and for the mucosa.

The inadequate use of the product can take the irritation or tissue destruction. The retractor cord impregnated with **HEMOSTANK** do not should be forced to beyond of apical extension of cleft gum, or involve the strangled gum tissue against the dental surface.

Do not use it above a retractor cord already impregnated.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

HEMOSTANK should not be used in patients who are known to have sensibility to any of the ingredients listed.

WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.

“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.

FOR USE IN DENTISTRY ONLY