


PARAMONOCLOROFENOL
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO
PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN
Material para Desinfecção de Canal Radicular

biodinâmica

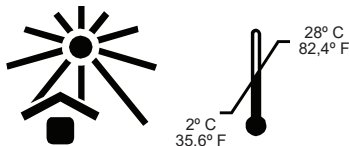

Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28°C

 **Biodinâmica Química e Farmacêutica Ltda.**
CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3
86206-006 - Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 43 3178-7000 Fax + 55 43 3178-7099
www.biodinamica.com.br
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+55 43 3178-7000

APRESENTAÇÃO:

1x20mL frasco **PARAMONOCLOROFENOL**;

ou

1x20mL frasco **PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO**;

ou

1x20mL frasco **PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN**.

ANVISA nº 10298550073.

COMPOSIÇÃO:

PARAMONOCLOROFENOL: Clorofenol, Álcool etílico 96º e Água Deionizada.

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO: Clorofenol, Cânfora, Álcool Etílico 96º e Água Deionizada.

PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN: Clorofenol, Álcool etílico 96º, Água Deionizada e Solução de Nitrofurazona 0,2%.

INDICAÇÃO:

O produto está indicado como medicação intracanal. Possui ação bactericida inespecífica destruindo um grande espectro de microorganismos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

Como medicação curativa intracanal, a sua utilização na concentração apresentada, demonstrou baixas reações texturais e não mostrou efeitos significativos sobre a síntese de proteínas, apresentando efeito antibacteriano de curta duração.

Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular.

A presença da nitrofurazona na fórmula de **PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN**, acentua a propriedade anti-infecciosa local.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Após o canal radicular estar instrumentado e seco, embeber uma bolinha de algodão no produto e secá-la com um pequeno rolo de algodão;
2. A bola de algodão seca, contendo o medicamento, é então colocada no assoalho da câmara pulpar;
3. Fechar hermeticamente com cimento apropriado;
4. Após 24 - 48 h, remover o curativo e proceder a obturação do canal radicular.

OBSERVAÇÃO:

O medicamento é volátil e possui tensão superficial baixa. Ele se espalhará rapidamente pelos canais radiculares no intervalo recomendado.

Numerosos estudos indicam que a quantidade mínima de medicamento aplicada pelo método da bola de algodão descrito acima, é adequada para o controle bacteriológico do tratamento.

CUIDADO ESPECIAL:

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

PARAMONOCLOROFENOL é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

PARAMONOCLOROFENOL
PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO
PARAMONOCLOROFENOL CON FURACIN
Material para Desinfección del Conducto Radicular

biodinámica

PRESENTACIÓN:

1x20mL frasco **PARAMONOCLOROFENOL**;
o
1x20mL frasco **PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO**;
o
1x20mL frasco **PARAMONOCLOROFENOL CON FURACIN**.
ANVISA nº 10298550073.

COMPOSICIÓN:

PARAMONOCLOROFENOL: Clorofenol, Alcohol Etilico 96º y Agua Deionizada.
PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO: Clorofenol, Alcanfora, Alcohol Etilico 96º y Agua Deionizada.
PARAMONOCLOROFENOL CON FURACIN: Clorofenol, Alcohol Etilico 96º, Agua Deionizada y Solución de Nitrofurazona 0,2%.

INDICACIÓN:

Producto indicado como medicación intracanal. Tiene acción bactericida inespecífica destruyendo gran espectro de microorganismos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Como medicación curativa intracanal, su uso en la concentración presentada resulto en bajas reacciones texturales y no hubo efecto significativo sobre la síntese de proteínas, presentando acción antibacteriano de corta duración.

Cantidades mínimas de este producto son muy eficaces para el tratamiento de todo el conducto radicular. La presencia de la nitrofurazona en la fórmula de PARAMONOCLOROFENOL CON FURACIN, aumenta la propiedad anti infecciosa local.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Después de la instrumentación del conducto radicular y cuando lo mismo estuviere seco, aplicar el producto en una pelota de algodón y secar con un rollo de algodón;
2. La pelota seca de algodón, contiendo el producto es colocada en la base de la cámara de la pulpa;
3. Cerrar herméticamente con cemento apropiado;
4. Después de 24 - 48 h, remover el curativo y hacer la obturación del conducto radicular.

NOTA:

Es un producto volátil y tiene tensión superficial baja. Tiene la característica de esparcir rápidamente por los conductos radiculares, en el tiempo recomendado.

Hay muchos estudios indicando que la cantidad mínima del producto, aplicado por el método de la pelota de algodón reportado arriba, es adecuado para el control bacteriológico del tratamiento.

CUIDADOS ESPECIALES:

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

PARAMONOCLOROFENOL es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

PARAMONOCHELOPHENOL
CAMPFORATED PARAMONOCHELOPHENOL
PARAMONOCHELOPHENOL WITH FURACIN
Root Canal Disinfection Material

biodinámica

CONTENTS:

1x20mL flask **PARAMONOCHELOPHENOL**;
or
1x20mL flask **CAMPFORATED PARAMONOCHELOPHENOL**;
or
1x20mL flask **PARAMONOCHELOPHENOL WITH FURACIN**.
ANVISA nº 10298550073.

COMPOSITION:

PARAMONOCHELOPHENOL: Chlorophenol; 96º Ethyl Alcohol and Deionized Water.
CAMPFORATED PARAMONOCHELOPHENOL: Chlorophenol; Camphor; 96º Ethyl Alcohol and Deionized Water.
PARAMONOCHELOPHENOL WITH FURACIN: Chlorophenol, 96º Ethyl Alcohol, Deionized Water and Solution of Nitrofurazon 0,2%

INDICATION:

It is indicated as an intracanal curative.
It has non-specific bactericide action destroying a broad spectrum of microorganisms.

TECHNICAL INFORMATION:

As intracanal curative, the use in presented concentration, has demonstrated low tissular reactions and shows no significant effects on the synthesis of proteins, presenting antibacterial short duration effect; Minimum quantity of this product is quite effective to act in whole canal; The presence of Nitrofurazon (**PARAMONOCHELOPHENOL WITH FURACIN**) assures to the product antiseptic and anti-infectious properties.

USE INSTRUCTIONS:

1. After root canal is instrumented and dried, soak a cotton ball in the product and dry it with a small cotton roll;
2. The dry cotton ball with the product is then placed in the pulp cavity floor;
3. Close hermetically with appropriate cement;
4. After 24 - 48hs, remove the curative and fill the root canal.

NOTE:

The product is volatile and has low surface tension. It will fast spread by root canal in the recommended period.

Minimum quantity of this product applied by cotton ball technique is quite effective for the bacterial control.

SPECIAL CARE:

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

PARAMONOCHELOPHENOL should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.

ADVERTÊNCIAS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.

“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.

FOR USE IN DENTISTRY ONLY