


EVICÁRIE

Evidenciador da Dentina Cariada

biodinâmica

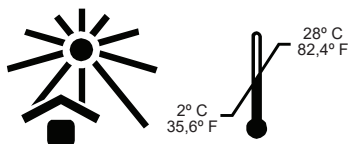


Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28°C



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3
86206-006 - Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 43 3178-7000 | Fax + 55 43 3178-7099
www.biodinamica.com.br
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713

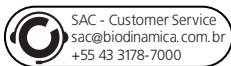

SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+55 43 3178-7000

APRESENTAÇÃO:

1 x 10mL frasco **EVICÁRIE** Líquido.

ou

1 x 2,5g seringa **EVICÁRIE** Gel.

1 bico aplicador.

ANVISA nº 10298550088.

COMPOSIÇÃO:

EVICÁRIE Líquido: Corante Ácido Vermelho S52, Propilenoglicol, Conservante e Água Deionizada.

EVICÁRIE Gel: Corante Ácido Vermelho S52, Propilenoglicol, Espessante, Conservante e Água Deionizada.

INDICAÇÃO:

EVICÁRIE é indicado para a identificação da dentina cariada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

Os evidenciadores como **EVICÁRIE** são materiais usados para auxiliar o profissional na diferenciação entre a dentina afetada e a dentina infectada em tratamentos restauradores. A dentina afetada não está contaminada com bactéria apresentando-se mais amolecida que a dentina saudável não deve ser removida, enquanto que, a dentina infectada deve ser removida antes da restauração da cavidade, que cora de vermelho a dentina desmineralizada e infectada, evidenciando o tecido que deve ser removido.

EVICÁRIE diferencia clinicamente de forma bem clara a camada de dentina infectada, não pigmentando as demais camadas ou a dentina hígida.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Realizar isolamento do dente cariado (É recomendado isolamento absoluto);
2. Após lavar e secar o dente cariado, aplicar uma gota de **EVICÁRIE** na região afetada;
- Obs: Para evitar a contaminação cruzada ou infecção, não aplicar o produto diretamente do frasco ou seringa para a cavidade cariada. (usar aplicador descartável).
3. Aguardar 10 segundos e enxaguar com água;
4. Remover a camada externa de dentina cariada que está corada de vermelho;
5. Repetir a operação quantas vezes forem necessárias até que não fique nenhuma área corada pelo produto, assegurando assim a completa remoção da dentina infectada;
6. A cavidade, depois da remoção do tecido corado por **EVICÁRIE**, está pronta para ser restaurada.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Para evitar a contaminação cruzada ou infecção, não aplicar o produto diretamente do frasco ou seringa para a cavidade cariada. (usar aplicador descartável).

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente e procurar assistência médica.

Contato com a pele e roupas: Lavar com sabão e água imediatamente.

Limitar a aplicação do produto ao dente que está sendo tratado.

Cuidado com o contato do produto com outras restaurações existentes, especialmente nas áreas marginais. Os corantes são difíceis de serem removidos destas áreas.

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

EVICÁRIE é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

EVICÁRIE

Evidenciador de Caries de la Dentina

biodinâmica

PRESENTACIÓN:

1 x 10mL frasco **EVICARIE Líquido**.

o

1 x 2,5g jeringa **EVICARIE Gel**.

1 punta aplicadora.

ANVISA nº 10298550088

COMPOSICIÓN:

EVICARIE Líquido: Colorante Ácido Rojo S52, Propilenoglicol, Conservante y Agua Deionizada.

EVICARIE Gel: Colorante Ácido Rojo S52, Propilenoglicol, Espesante, Conservante y Agua Deionizada.

INDICACIÓN:

EVICARIE es indicado para la identificación de caries de la dentina.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Los evidenciadores de las caries, como el **EVICARIE**, son materiales utilizados para ayudar los profesionales en la diferenciación entre la dentina infectada y la dentina cariada en tratamientos de restauración. La dentina afectada no está contaminada con bacterias y mismo siendo un tejido más suave que del dentina saludable, no debe ser removido, mientras que la dentina infectada debe ser removida antes de la restauración de la cavidad. La acción del **EVICARIE** es por el colorante ácido rojo S52 presente en su formulación y el lugar con color rojo indica que la dentina está desmineralizada y infectada.

EVICARIE claramente diferencia clínicamente la camada de la dentina afectada, que debe ser removida, no pigmentando las otras camadas o la dentina normal.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Aislar el diente cariado con aislamiento absoluto;
2. Después de lavar y secar el diente cariado, aplicar una gota del Evicarie en la región infectada;
Obs.: Para prevenir la contaminación cruzada o infección, no aplicar el producto directamente del frasco o de la jeringa en la cavidad cariada. (Utilizar un aplicador desechable).
3. Aguardar 10 segundos y enjuagar con agua;
4. Remover la camada externa de la dentina cariada que está roja;
5. Repetir la operación tantas veces cuantas sean necesarias hasta que no se quede más ninguna área colorada por el producto, garantizando así la completa remoción de la dentina cariada;
6. La cavidad, después de la remoción del tejido colorado por **EVICARIE** esta lista para ser restaurada.

CUIDADOS ESPECIALES:

Para prevenir la contaminación cruzada o infección, no aplicar el producto directamente del frasco o de la jeringa en la cavidad cariada. (Utilizar un aplicador desechable).

Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua corriente y procurar por atención médica.

Contacto con la piel y ropas: Lavar con jabón y agua inmediatamente.

Limitar la aplicación del producto al diente que está siendo cuidado.

Atención al contacto del producto con otras restauraciones ya existentes, especialmente en las áreas marginales.

Los colorantes son difíciles de ser removidos de estas áreas.

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurándose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

EVICARIE es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

EVICÁRIE

Dentin Caries Indicator

biodinâmica

CONTENTS:

1 x 10mL flask **EVICARIE Liquid**.

or

1 x 2,5g syringe **EVICARIE Gel**.

1 application tip.

ANVISA nº 10298550088

COMPOSITION:

EVICARIE Liquid: Red Colouring Acid S52, Propilenoglicol, Preservative and Deionized Water.

EVICARIE Gel: Red Colouring Acid S52, Propilenoglicol, Thickener, Preservative and Deionized Water

INDICATION:

EVICARIE is indicated to identify dentin caries

TECHNICAL INFORMATION:

The caries indicators as **EVICARIE** are materials used to assist the professional in the differentiation between the affected dentin and the caries dentin in restoring treatments. The affected dentin is not contaminated with bacteria and even being a more soft tissue than the health dentin, should not be removed while the infected dentin must be removed before cavity restoration.

The **EVICARIE'S** action is noticed through the red colouring acid S52 present in its formulation and the red coloured places indicate the decalcified and infected dentin.

EVICARIE clinically clear differentiates the infected dentin layer that should be removed and do not pigment the others layers or normal dentin.

USE INSTRUCTIONS:

1. Complete isolate the tooth;
2. After washing and drying the caries tooth, apply a drop of **EVICARIE** in the affected area;
Note: To prevent the crossed contamination or infection, do not apply directly the product from the flask or syringe in the carious cavity. (Use a disposable application tip).
3. Wait 10 seconds and wash with water;
4. Remove the external layer of the caries dentin that is red coloured;
5. Repeat this operation as many times as necessary until there is no more red coloured area, assuring the complete removal of the caries dentin;
6. After the removal of the red coloured tissue, the cavity is ready to be restored.

SPECIAL CARES:

To prevent the crossed contamination or infection, do not apply directly the product from the flask or syringe in the carious cavity. (Use a disposable application tip).

Avoid direct contact with the eyes, skin or clothes.

In case of contact with the eyes: rinse thoroughly with water and look for medical assistance.

In case of contact with skin and clothes: wash with soap and water immediately.

Only apply the product in the tooth that is being treated.

Be careful do not put the product in contact with others existing restorations, especially in the marginal areas.

The colourings are difficult to be removed from these areas.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

EVICARIE should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.

WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.

“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.

FOR USE IN DENTISTRY ONLY