


MODELLARE RESIN

Resina Modeladora Fotopolimerizável

biodinâmica®

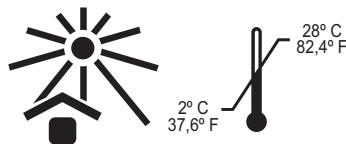

Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28 °C.



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 Parque Industrial IV
86200-000 Ibiaporã - Paraná - Brasil
Fone + 55 (43) 3178-7000 Fax + 55 (43) 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+ 55 43 3178-7000



BDP - Biodinâmica Dental Products LDA.
Zona Ind. Ladeira da Calça,
Código Postal 3260-305
Figueiró dos Vinhos - Portugal
sac@bdpdental.pt | www.bdpdental.pt

APRESENTAÇÃO:

2x 1,2g seringas de MODELLARE RESIN;
Bicos aplicadores.

Reg. ANVISA: 10298550188

COMPOSIÇÃO:

Matriz de monômeros metacrílicos, carga inorgânica e iniciadores.

INDICAÇÃO:

Indicado como agente umidificador e auxiliar de escultura em resina composta.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

O **MODELLARE RESIN** é uma resina micro particulada de baixa viscosidade utilizada para facilitar a inserção e escultura de resina composta. Sua característica umectante que melhora a esculpibilidade da resina composta e evita sua aderência ao instrumental. Por apresentar carga e ser livre de solventes, o produto não altera significativamente as características mecânicas das resinas compostas sobre as quais ela é aplicada. Além disto, cria uma camada de inibição de oxigênio necessária para a aplicação de camadas incrementais e para união resina-resina; por ser fotopolimerizável, sofre o processo de polimerização junto com o material restaurador.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Retirar a tampa, adaptar o bico aplicador na seringa. Dispensar uma ou duas gotas em um bloco de mistura ou placa de vidro.
2. Inserir o incremento inicial da resina composta no preparo, molhar a espátula no **MODELLARE RESIN**. Com o **MODELLARE RESIN** no instrumental ou pincel, esculpir sua restauração, deixar a resina no formato desejado.
3. Fotopolimerizar. Embora o **MODELLARE RESIN** requeira a fotopolimerização por 10 (dez) segundos, seguir as recomendações de tempo de cura estabelecido pelo fabricante da resina composta para garantir a cura completa do incremento do compósito. Incrementos adicionais da resina composta irão aderir ao **MODELLARE RESIN** polimerizado.

CUIDADOS ESPECIAIS:

- Se acidentalmente o produto entrar em contato com o olho, lavar abundantemente com água e procurar atendimento médico, imediatamente. Em caso de contato com outros tecidos, lavar imediatamente com água em abundância por vários minutos.
- Contaminação cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Eliminar os componentes e os acessórios de uso único utilizados ou contaminados. Não limpar, desinfetar nem reutilizar.
- Resinas não polimerizadas podem causar sensibilização em pessoas susceptíveis. Evitar a exposição com a pele. Em caso de contato com a pele, lavar abundantemente com sabão e água.
- Teste o escoamento dos materiais da seringa e da ponta de aplicação antes da aplicação intraoral.
- Após o uso, recomenda-se realizar um leve tracionamento no êmbolo, afim de diminuir a pressão interna da seringa e evitar vazamento do produto.
- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÕES:

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

MODELLARE RESIN

Resina Modeladora Fotocurable

biodinámica®

PRESENTACIÓN:

2x1,2g jeringa de MODELLARE RESIN;

Puntas aplicadoras.

Reg. ANVISA: 10298550188

COMPOSICIÓN:

Matriz de monómeros metacrílicos, cargas inorgánicas, iniciadores.

INDICACIÓN:

Indicado como humectante y auxiliar para escultura en resina compuesta.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

MODELLARE RESIN es una resina de micropartículas de baja viscosidad utilizada para facilitar la inserción y el tallado de resina compuesta. Su característica humectante que mejora la modelabilidad de la resina compuesta y evita que se adhiera a los instrumentos. Por presentar carga y ser sin disolventes, el producto no altera significativamente las características mecánicas de las resinas compuestas a las que se aplica.

Además, crea una capa inhibidora de oxígeno necesario para la aplicación de capas incrementales y para la unión resina-resina; por ser fotopolimerizable, se somete al proceso de polimerización junto con el material de restauración.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Retire la tapa, adapte la punta del aplicador a la jeringa. Dispense una o dos gotas en una almohadilla batidora o placa de vidrio.

2. Introducir el incremento inicial de resina compuesta en la preparación, mojar la espátula en el **MODELLARE RESIN**. Con el **MODELLARE RESIN** en el instrumento o cepillo, esculpe su restauración, dejar la resina en la forma deseada.

3. Fotopolimerizar. Aunque **MODELLARE RESIN** requiere fotocurado por 10 (diez) segundos, siga las recomendaciones de tiempo de curado establecidas por el fabricante de la resina compuesta para asegurar el curado completo del incremento de composite. Incrementos adicionales de la resina compuesta se adherirá al **MODELLARE RESIN** polimerizado.

CUIDADOS ESPECIALES:

- Si el producto entra accidentalmente en contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua y busque atención médica inmediatamente. En caso de contacto con otros tejidos, lavar inmediatamente con abundante agua durante varios minutos.

- Contaminación cruzada: el producto puede contener elementos diseñados para un solo uso. Para eliminar componentes y accesorios de un solo uso usados o contaminados. No limpiar, desinfectar ni reutilizar.

- Las resinas no polimerizadas pueden causar sensibilización en personas susceptibles. Evitar el exposición de la piel. En caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón.

- Pruebe el flujo de los materiales de la jeringa y la punta de administración antes de la aplicación intraoral.

- Después del uso, se recomienda realizar una ligera tracción sobre el émbolo, para reducir la presión dentro de la jeringa y evitar fugas del producto.

- Deseche el producto de acuerdo con la legislación local, asegurando su completa caracterización errónea para evitar su reutilización y daño ambiental.

CONTRAINDICACIÓN:

MODELLARE RESIN está contraindicado para personas con sensibilidad reportada a cualquiera de los componentes del producto.

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

MODELLARE RESIN

Light-curing Shaping Resin

biodinámica®

PRESENTATION:

2x 1,2g syringe **MODELLARE RESIN**;

Application tips.

Reg. ANVISA: 10298550188

COMPOSITION:

Matrix of methacrylic monomers, inorganic fillers, initiators.

INDICATION:

Indicated as a humidifying agent and auxiliary for sculpture in composite resin.

TECHNICAL INFORMATION:

MODELLARE RESIN is a low viscosity micro-particulate resin used to facilitate the insertion and carving of composite resin. Its humectant characteristic that improves the sculptability of the composite resin and prevents it from adhering to the instruments. For presenting load and being Solvent-free, the product does not significantly alter the mechanical characteristics of the resins compounds to which it is applied. In addition, it creates an oxygen-inhibiting layer necessary for the application of incremental layers and for resin-resin bonding; for being photopolymerizable, undergoes the polymerization process along with the restorative material.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Remove the cap, adapt the applicator tip to the syringe. Dispense one or two drops onto a pad mixer or glass plate.

2. Insert the initial increment of composite resin into the preparation, wet the spatula in the **MODELLARE RESIN**. With the **MODELLARE RESIN** on the instrument or brush, sculpt your restoration, leave the resin in the desired shape.

3. Light cure. Although **MODELLARE RESIN** requires light curing for 10 (ten) seconds, follow the curing time recommendations established by the resin manufacturer composite to ensure complete cure of the composite increment. Additional increments of composite resin will adhere to the polymerized **MODELLARE RESIN**.

SPECIAL CARES:

- If the product accidentally comes into contact with the eye, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. In case of contact with other fabrics, wash immediately with plenty of water for several minutes.

- Cross contamination: the product may contain items designed for single use. To eliminate used or contaminated single-use components and accessories. Do not clean, disinfect nor reuse.

- Non-polymerised resins may cause sensitization in susceptible persons. avoid the skin exposure. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water.

- Test flow of syringe and delivery tip materials prior to intraoral application.

- After use, it is recommended to perform a slight traction on the plunger, in order to reduce the pressure inside the syringe and avoid leakage of the product.

- Dispose of the product in accordance with local legislation, ensuring its complete mischaracterization in order to prevent its reuse and environmental damage.

CONTRAINDICATION:

MODELLARE RESIN is contraindicated for people with reported sensitivity to any of the product's components.

Do not use material after expiry date.

The manufacture is not responsible for any damage resulting from a misuse or not provided for the instructions of use.

“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.

FOR USE IN DENTISTRY ONLY