

PROVIPLAST GLAZE

Selante e Glazeador Fotopolimerizável para Resina Bisacrílica

biodinâmica®

APRESENTAÇÃO:

1 x 5 mL frasco **PROVIPLAST GLAZE**

ANVISA nº 10298550112

INDICAÇÃO:

PROVIPLAST GLAZE é indicado para selamento e glazamento de superfícies de coroas e pontes provisórias em resinas bisacrílicas e restaurações em compósitos.

COMPOSIÇÃO:

Matriz de monômeros metacrílicos, iniciadores, estabilizador e espessante.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

PROVIPLAST GLAZE é um material monocomponente, especialmente desenvolvido para o tratamento de superfícies de resinas bisacrílicas em coroas e pontes temporárias. Sua aplicação resulta em um acabamento com uma superfície lisa, brilhante, ultra seca e resistente ao manchar. O tempo de polimerização é de 20 segundos, e deve ser utilizado um fotopolimerizador com potência mínima de 400 mW.

INSTRUÇÕES DE USO AO PACIENTE:

Selamento de Superfícies:

1. Aplicar uma camada fina do produto, diretamente na superfície do material provisório ou compósito;

2. Para cada camada aplicada, fotopolimerizar por 20 segundos.

Obs.: **PROVIPLAST GLAZE** pode ser também utilizado sobre restaurações pré-existentes. Para melhor adesão, a superfície deve ser asperizada, limpa e seca antes da aplicação do produto.

CUIDADOS ESPECIAIS:

-O contato do produto não polimerizado com pele e olhos pode causar irritação;

- Em contato com os olhos, lavar com água corrente e procurar orientação médica;

- Em contato com a pele, lavar a região com água corrente e sabão neutro;

- Em ingestão acidental de grande quantidade do produto, NÃO INDUZIR AO VÔMITO e procurar orientação médica;

- É recomendado o uso de luvas, máscaras descartáveis e óculos de proteção para manusear o produto;

- Após o uso deve ser observado o perfeito vedamento do frasco para evitar que o material seja exposto à luminosidade;

- Não armazenar na proximidade de produtos que contenham eugenol, pois tal fato interfere na polimerização;

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

PROVIPLAST GLAZE é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade;

“Manter o produto longe do alcance das crianças”;

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO-DENTISTA;

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

PROVIPLAST GLAZE

Sellador y glaseador fotocurado de resina bisacrílica

biodinâmica®

PRESENTACIÓN:

1 x 5 mL frasco **PROVIPLAST GLAZE**

ANVISA nº 10298550112

INDICACIÓN: **PROVIPLAST GLAZE** está indicado para sellar y glasear superficies de coronas y puentes temporales en resinas bisacrílicas y restauraciones de composite.

COMPOSICIÓN:

Matriz de monómeros metacrílicos, iniciadores, estabilizadores y espesantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PROVIPLAST GLAZE es un material de un componente especialmente desarrollado para el tratamiento superficial de resinas bisacrílicas en coronas y puentes temporales. Su aplicación da como resultado un acabado superficial liso, brillante, ultra seco y resistente a las manchas.

El tiempo de curado es de 20 segundos y se debe utilizar una luz de curado con una potencia mínima de 400 mW.

INSTRUCCIONES DE USO:

Sellado de superficie:

1. Aplique una capa delgada de producto directamente a la superficie del material provisional o compuesto;

2. Para cada capa aplicada, fotopolimerice durante 20 segundos.

Nota: **PROVIPLAST GLAZE** también se puede usar en restauraciones preexistentes. Para una mejor adhesión, la superficie debe ser rugosa, limpiada y secada antes de la aplicación del producto.

CUIDADOS ESPECIALES

- El contacto del producto en el polimerizado con el cabello y los ojos puede causar irritación;
 - En contacto con los ojos, lavar con agua corriente y consultar a un médico;
 - En contacto con la piel, lave el área con agua corriente y jabón suave;
 - En caso de ingestión accidental de grandes cantidades del producto, NO INDUZCA EL VÓMITO y solicite asistencia médica;
 - Se recomienda el uso de manijas, máscaras desechables y gafas para manipular el producto;
 - Después del uso, la botella debe estar perfectamente sellada para evitar que el material quede expuesto a la luz;
 - No almacenar alrededor de productos que contengan eugenol, que interfieren con la polimerización.
- Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurándose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

PROVIPLAST GLAZE está contraindicado para personas con sensibilidad reportada a cualquiera de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No utilizar productos además del período indicado de vencimiento;
 Mantener el producto lejos del alcance de los niños;
 USO EXCLUSIVO DEL DENTISTA;

PROVIPLAST GLAZE

Light Curing Bisacrylic Resin Sealant and Glazer

biodinâmica

CONTENTS:

1 x 5 mL flask **PROVIPLAST GLAZE**

ANVISA n° 10298550112

INDICATION:

PROVIPLAST GLAZE is indicated for sealing and glazing of temporary crown and bridge surfaces in bisacrylic resins and composite restorations.

COMPOSITION:

Matrix of methacrylic monomers, initiators, stabilizers and thickeners.

TECHNICAL INFORMATION:

PROVIPLAST GLAZE is a one-component material specially developed for surface treatment of bisacrylic resins on temporary crowns and bridges. Its application results in a smooth, shiny, ultra dry and stain resistant finish. The curing time is 20 seconds and a curing light with a minimum power of 400 mW should be used.

USE INSTRUCTIONS:

Surface Sealing:

1. Apply a thin layer of product directly to the surface of the provisional material or composite;
2. For each applied layer, light cure for 20 seconds.

Note: **PROVIPLAST GLAZE** can also be used on pre-existing restorations. For best adhesion, the surface should be roughened, cleaned and dried prior to application of the product.

SPECIAL CARES:

- Contact of non-polymerized product with skin and eyes may cause irritation;
- In contact with eyes, wash with running water and seek medical advice;
- In contact with skin, wash the area with running water and mild soap;
- In case of accidental ingestion of large quantities of the product, DO NOT INDUCE VOMITING and seek medical advice;
- The use of gloves, disposable masks and goggles is recommended to handle the product;
- After use the perfect sealing of the bottle should be observed to prevent the material being exposed to light;
- Do not store in the vicinity of products containing eugenol, as this interferes with polymerization;
- Dispose of the product in accordance with local legislation, ensuring its complete decharacterization in order to prevent its reuse and environmental damage.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

PROVIPLAST GLAZE is contraindicated for people with reported sensitivity to any of the product's components.

WARNINGS:

Do not use material after expiry date;
 Keep material out of the reach of children;
FOR USE IN DENTISTRY ONLY;

The manufacturer is not responsible for any damage resulting from a misuse or not provided for the instructions of use.



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira

R. Ronat Walter Sodré, 4350 - SETOR 3

86206-006 - Ibiçporã - Paraná - Brasil

Fone + 55 43 3178-7000 | Fax + 55 43 3178-7099


www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo

CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
 +55 43 3178-7000

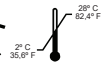

Conservar ao abrigo da luz solar
 em temperaturas entre 2 a 28°C

EM B003535 Rev. 01 08/07/26